




下行置換術における 術中運動誘発電位の準備

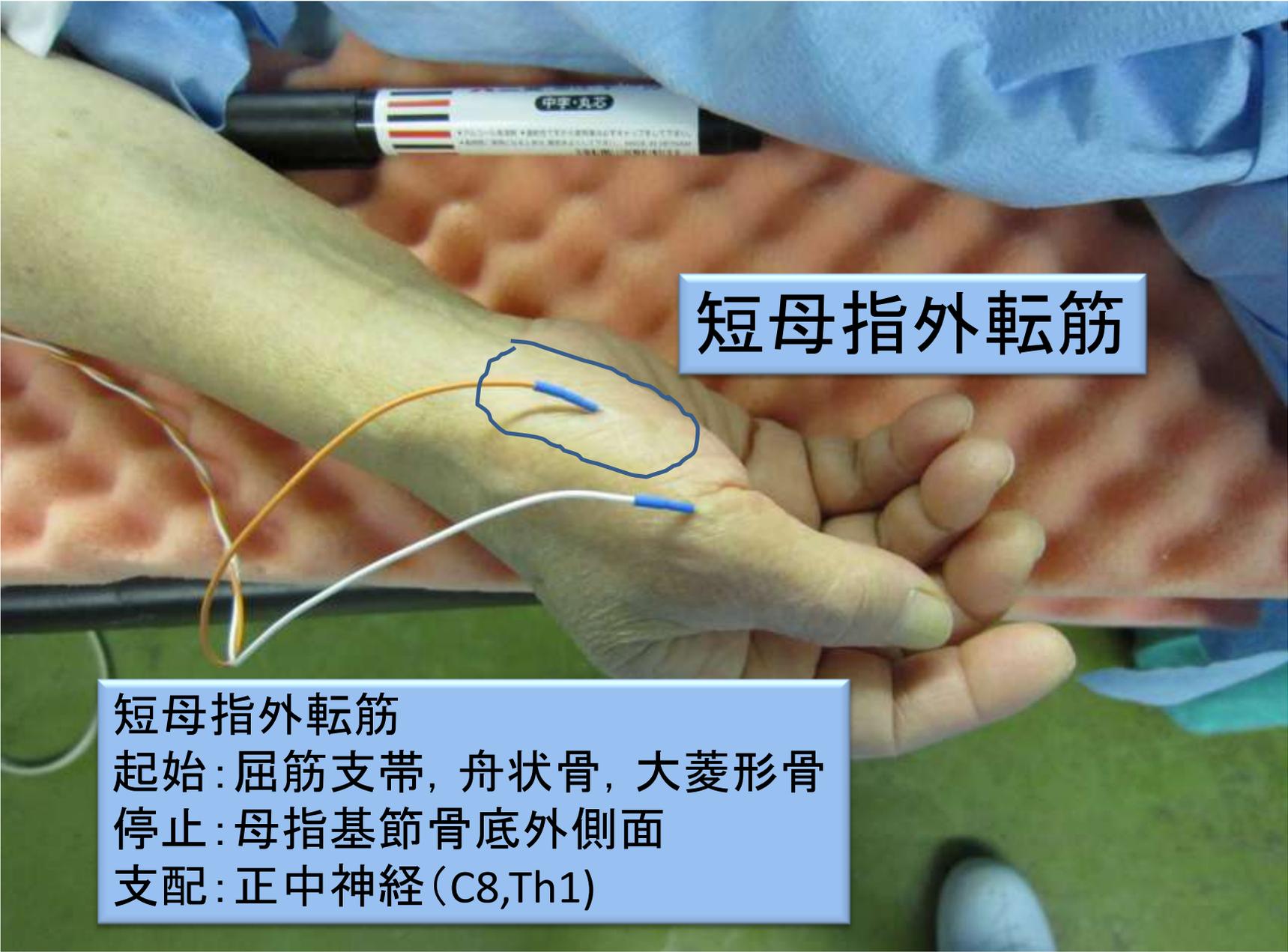


短母指外轉筋

短母指外轉筋

起始：屈筋支帶，舟狀骨，大菱形骨

停止：母指基節骨底外側面

支配：正中神經(C8,Th1)

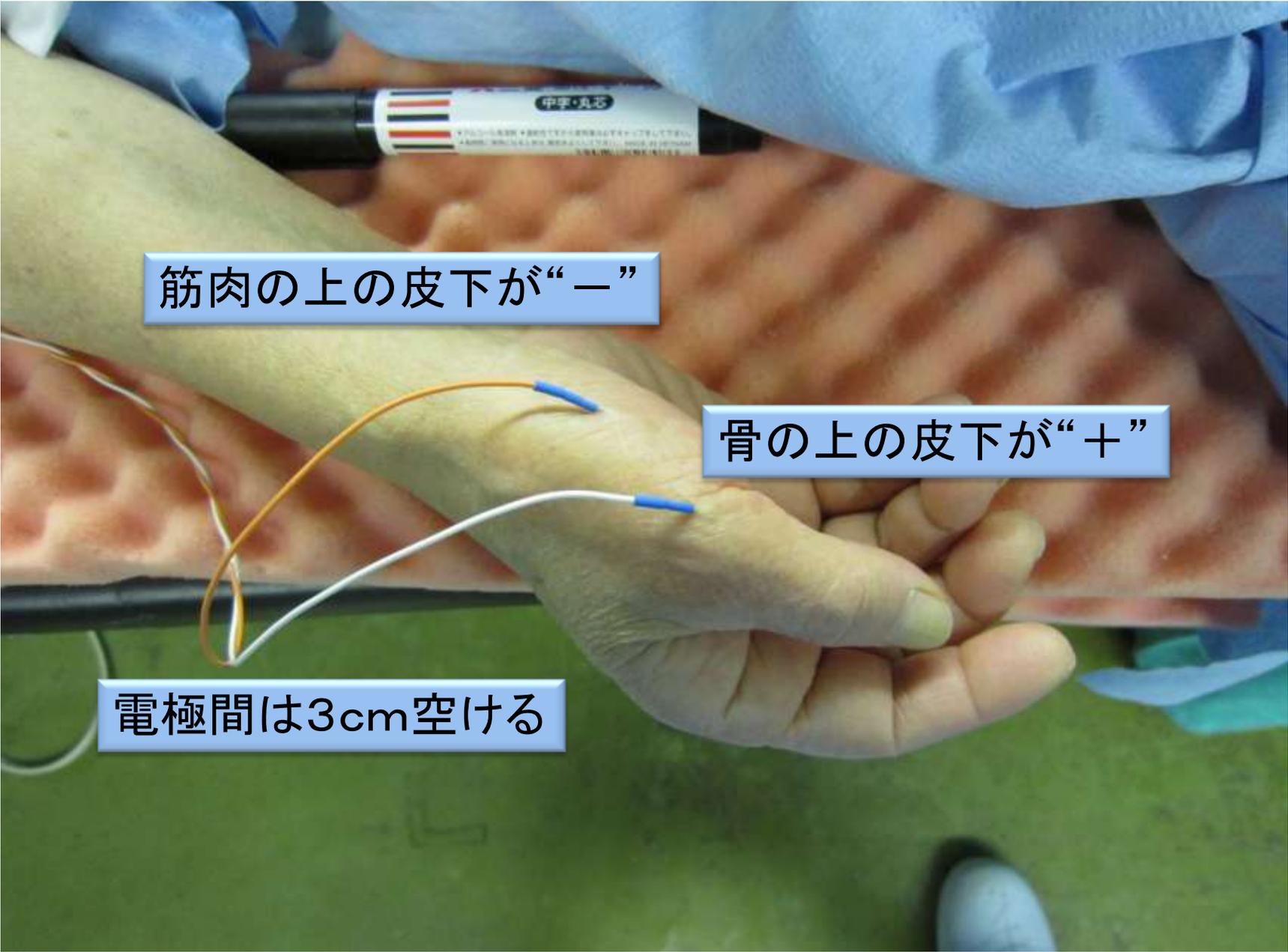

筋肉の上の皮下が“-”

骨の上の皮下が“+”


電極間は3cm空ける

前脛骨筋

起始：脛骨外側顆と外側面の上半，骨間膜

停止：内側楔状骨の内側および下面と第1中足骨底

支配：深腓骨神経 (L4,5)

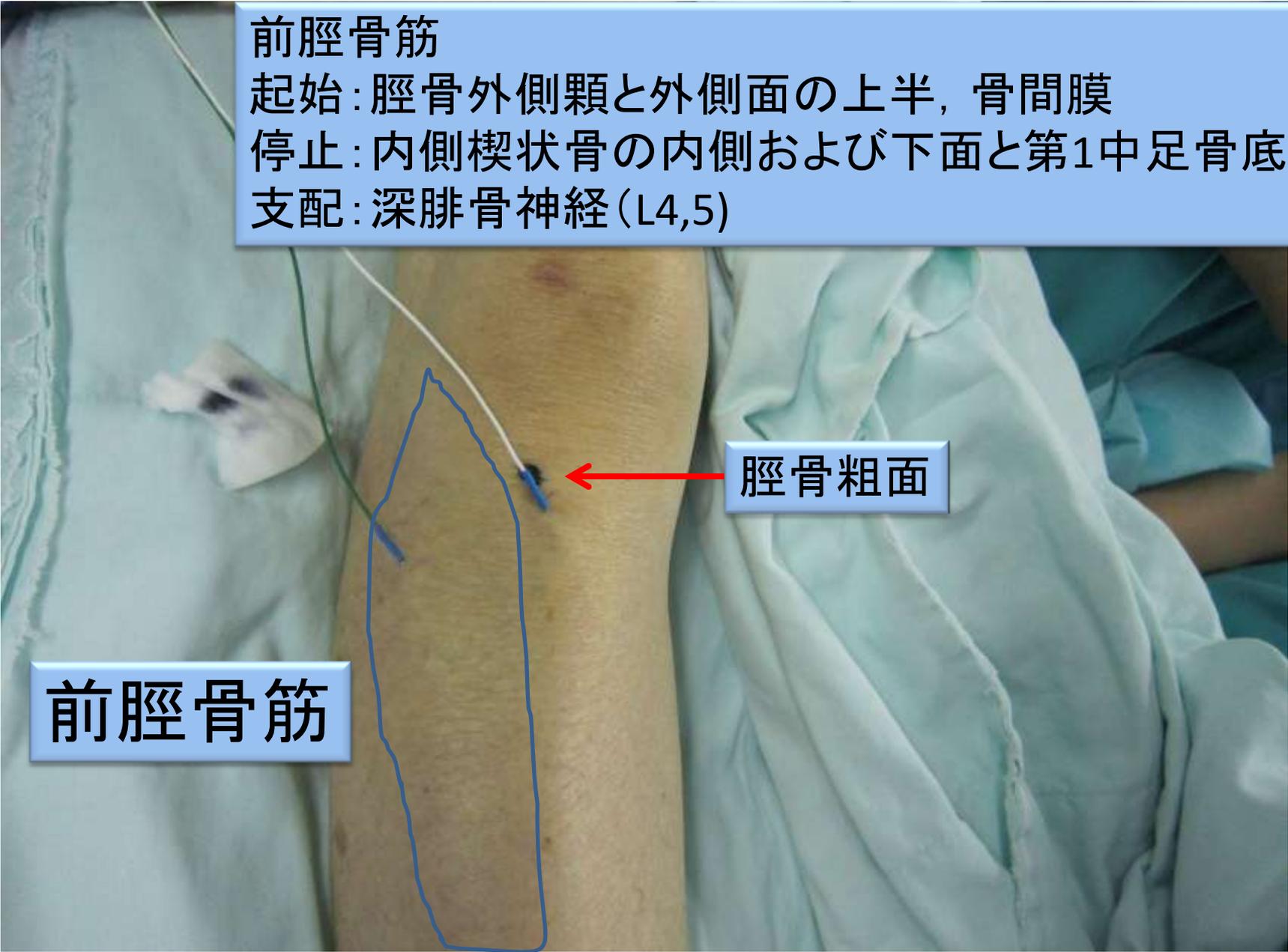

脛骨粗面


前脛骨筋

母趾外転筋

起始：踵骨隆起の内側突起，屈筋支帯，足底腱膜

停止：第1趾基節骨底の内側面

支配：内側足底神経(S2,3)

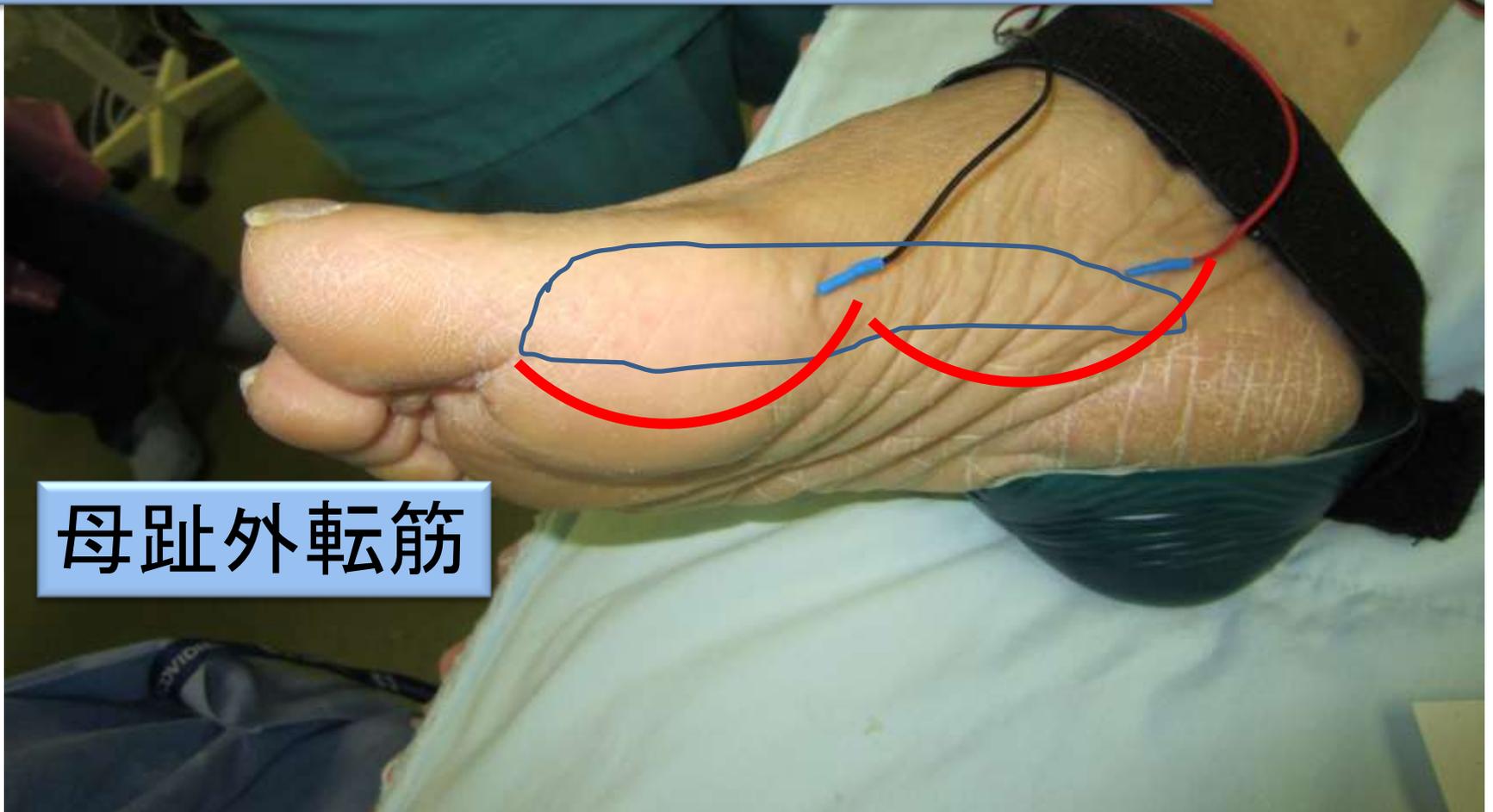


母趾外転筋

モニター装置



皿電極

外後頭隆起と鼻を結んだ線と、両耳孔を結んだ線の交点から前方2cmの位置から左右5cmの位置につける

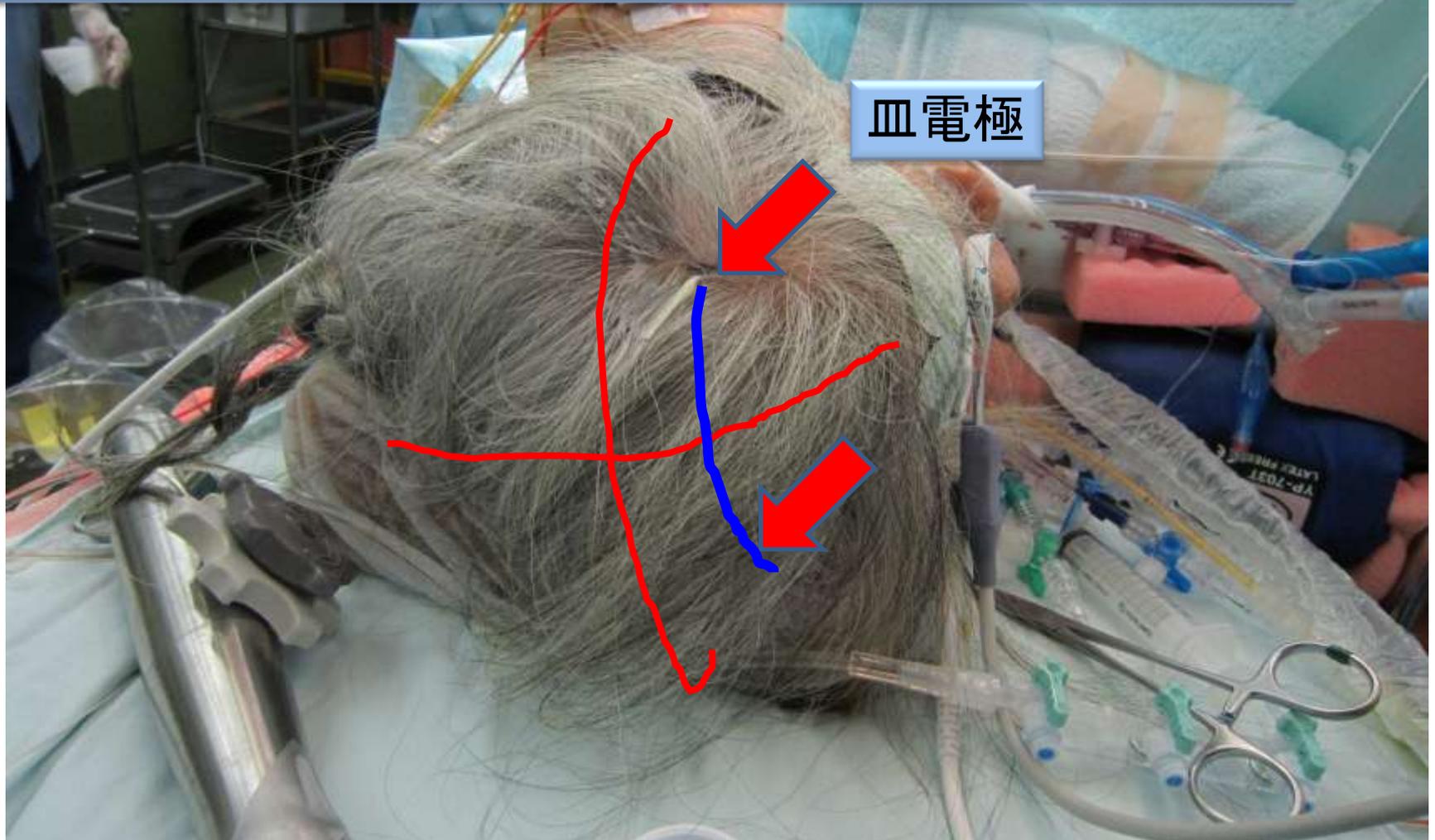



- ①よく頭皮をアルコール綿で拭く
- ②スキンプュアを皮膚に塗り込むようにして余ったものは拭く
- ③ペーストを皿電極に十分に塗り、さらに3cm角に切ったハイゼガーゼにもペーストを塗り、頭皮に右図のようにつける